

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

Poussette Kimba Spring

Poussette tout-terrain Kimba Cross

Poussettes porte-coquilles ou multiréglables et évolutives, pliantes

Taille 1 pour enfant mesurant de 80cm à 1m35

Taille 2 pour enfant mesurant de 1m à 1m60

medinov

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

www.medinov.fr

Fournisseur Agréé

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1



reddot design award

Assise taille 1



Assise taille 2



Kimba Spring taille 1
Roues avant fixes



Kimba Spring taille 1
Roues avant pivotantes



Kimba Cross



Kimba Spring taille 2
Roues avant pivotantes

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



medinov

99, rue de Gerland

69007 Lyon

Tél: 04 37 28 08 14

www.medinov.fr

Fournisseur Agréé

N° IDENTIFICATION 69.2.65115.1

Kimba Spring

Design et personnalisable



La poussette Kimba Spring est multiréglable et évolutive : elle pourra suivre votre enfant au fur et à mesures de son évolution.



reddot design award
winner 2003

Kimba Spring

Design, multiréglable et évolutive

Pour une adaptation personnalisée de l'enfant, l'assise est entièrement réglable : de multiples cales et systèmes de fixation sont disponibles pour un positionnement et un maintien optimal. La poussette Kimba Spring peut ainsi évoluer au même rythme que l'enfant. Pour les parents, elle apporte également des avantages certains : il suffit d'un tour de main pour dissocier l'assise du châssis ou même positionner l'assise dans le sens contraire de la marche. Grâce à son système de suspension, la poussette Kimba Spring est adaptée à tous les types de terrains. Enfin, la poussette Kimba Spring, avec ses 15 Kg, peut se prévaloir d'être un poids plume.

Les plus de la Kimba Spring : des fonctionnalités évolutives et un Design reconnu internationalement.



Kimba Spring



Châssis d'extérieur, rigide



Tablette thérapeutique transparente




Mécanisme de pliage



Repose-pieds rabattable avec réglage angulaire



Inclinaison de l'assise, du dossier et des repose-pieds

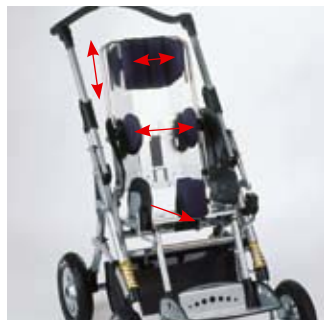

Réglages de l'assise



Poussette pliée



Châssis d'intérieur avec assise multifonctionnelle

Châssis d'extérieur

- Taille 1 : roues avant fixes ou pivotantes
- Taille 2 : roues avant pivotantes
- Suspension de l'assise réglable sur 3 niveaux
- Design : tubes en aluminium grand diamètre
- Réglage de l'inclinaison de l'assise à partir des poignées
- Mécanisme de pliage à dimensions compactes avec enclenchement automatique des crans de sécurité
- Poignées ergonomiques, réglables en hauteur
- Sac de rangement pliant

Châssis d'intérieur

- Réglable en hauteur
- Empattement télescopique réglable
- Facile à manoeuvrer grâce aux double roues pivotantes

Assise multifonction

- Réglage sans palier de la profondeur d'assise et de la largeur d'assise, de la hauteur du dossier et de la longueur du repose-jambes
- Pelotes latérales de délimitation, pelotes de hanches réglables
- Réglage autonome de l'inclinaison de l'assise, de l'angle dorsal et de l'angle des repose-pieds
- Repose-pieds „anatomique“
- Palette repose-pieds avec réglage angulaire (en option)
- Positionnement de l'assise face / dos à la route grâce au système rapide de verrouillage automatique
- De nombreux accessoires : appuie-tête, différents systèmes de sangles, cales thoraciques, sacs, capotes pluie/soleil.

Caractéristiques techniques	Taille 1: 1-6 ans		Taille 2: 4-10 ans		Assise T. 1	Assise T. 2
	Châssis d'ext. T. 1	Châssis d'ext. T. 2	Châssis d'int. T. 1+2			
Hauteur des poignées	76-114	76-114				
Largeur	60/63	72	45			
Longueur			62-78			
Hauteur			41-62			
Profondeur d'assise			19-31		24-40	
Largeur d'assise					20-30	26-35
Largeur du repose-jambes					19-31	20-37
Hauteur/inclinaison du dossier					46-46/0° à +90°	56-70/0° à +90°
Diamètre de roue avant/ arrière	25,18/25	18/25				
Basculement de l'assise	-35° à +35°	-35° à +35°	-10° à +25°			
Charge admissible	50	50	50		35	35
Poids	8/8,6	9	6/7		7	8,8
Dimensions pliées (LxIxH)	86x60x32/84x60x36	86x72x33			72x40x22	82x44x27

Sous réserve de modifications techniques

Osaka Bock®

QUALITY FOR LIFE